

Anexos.

Anexo “A”.

Instrucciones para usar el electrocardiógrafo:

Registrar un electrocardiograma.


- a) Correr el programa de ECG en la computadora.
- b) Conectar el electrocardiógrafo a la computadora mediante el cable de audio.
- c) Conectar los electrodos al paciente.
- d) Encender el electrocardiógrafo.
- e) Dar click en el botón “Nuevo ECG” mostrado en la computadora.
- f) Ingresar los datos del paciente en la computadora.
- g) Presionar en el teclado del electrocardiógrafo las derivaciones deseadas y para finalizar el registro presionar el botón en “Detener” (modo manual), o bien, seleccionar la lectura de todas las derivaciones por intervalos de tiempo (modo automático).
- h) Seguir las indicaciones del programa si se desea copiar el electrocardiograma en algún dispositivo de almacenamiento extraíble.
- i) Una vez realizado el electrocardiograma, apagar el electrocardiógrafo.
- j) Detener el programa de ECG.
- k) Desconectar los electrodos al paciente.

Ver un electrocardiograma.

- a) Correr el programa de ECG en la computadora.
- b) Dar click en el botón “Ver ECG” mostrado en la computadora.
- c) Ingresar la ruta del archivo índice relacionado al electrocardiograma deseado.
- d) En la pantalla de la computadora se muestra el electrocardiograma.
- e) Para finalizar dar click en el botón “MenuPrinc” y detener el programa de ECG.

Anexo "C".

Diagrama eléctrico total del electrocardiógrafo (a partir de los diagramas eléctricos descritos en cada capítulo):

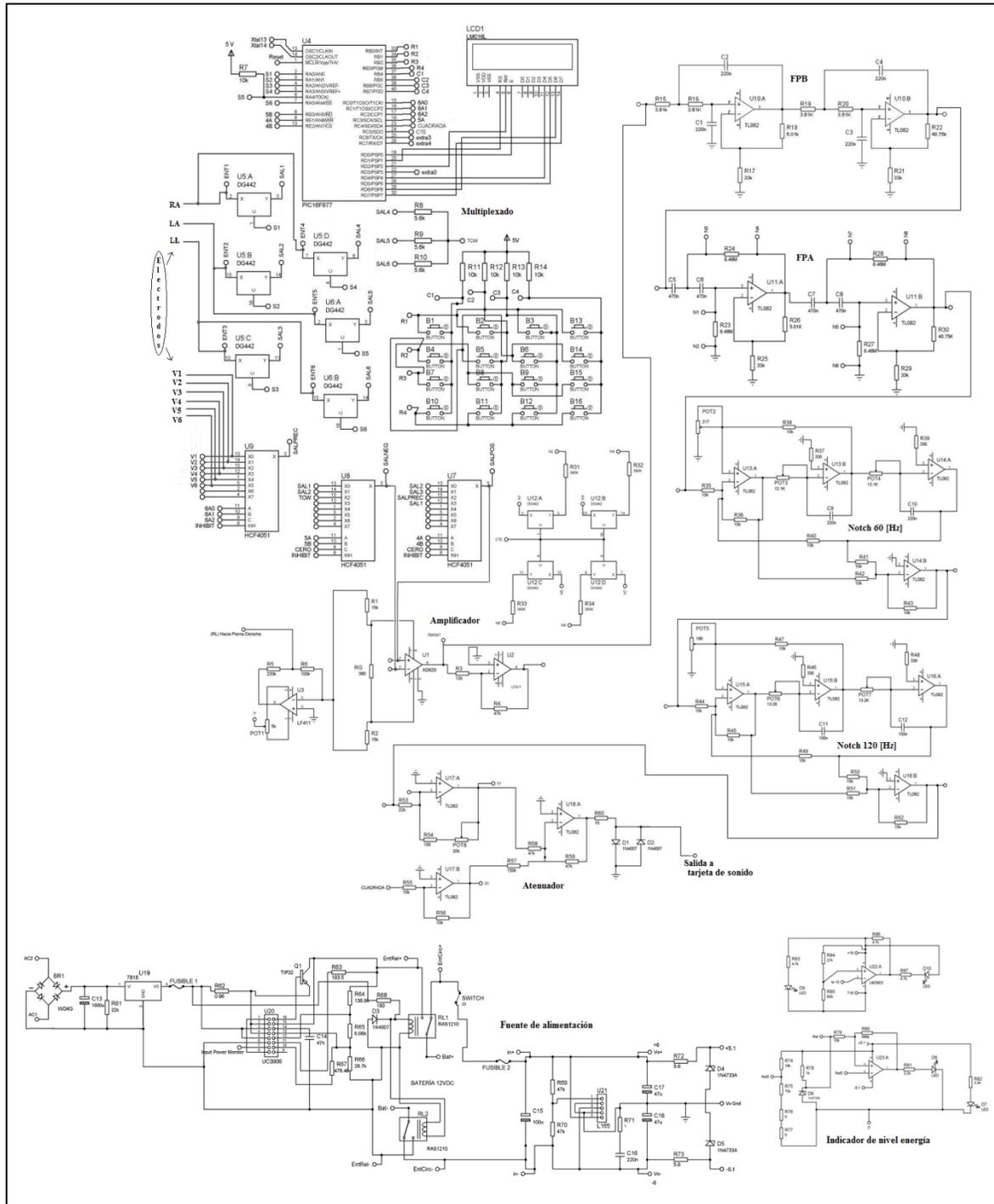

Anexo “D”.

“Patigramas” de los chips utilizados tomados de las hojas de datos de sus respectivos fabricantes:

